



Praxis Elite

Brugervejledning og vedligeholdelsesinstruktioner



Dok. nummer: IFU-DK-PRAXIS-001

Version: 1.0

Dato: 17-03-2026



Indholdsfortegnelse

1.	GENERELLE OPLYSNINGER	4
1.1	Formålet med dette dokument.....	4
1.2	Producent	4
1.3	Produktstatus og lovgivning	4
1.4	Brugerprofil	4
1.5	Symboler.....	4
2.	Anvendelse og brugskontekst	5
2.1	Tilsigtet anvendelse	5
2.2	Brugere og patienter	5
2.3	Anvendelsesområde	5
2.4	Anvendelsesbegrænsninger.....	5
2.5	Opbevaring og transport	5
2.6	Producenterklæringer.....	5
3.	Sikkerhed og advarsler	6
3.1	Generelle sikkerhedsprincipper.....	6
3.2	Brugsrelaterede risici.....	6
3.3	Sikker brug.....	6
3.4	Hændelser og indberetning	7
4.	Produktets opbygning og konfiguration	8
4.1	Generel udførelse	8
5.	Tekniske specifikationer.....	13
5.1	Tekniske data.....	13
6.	Installation og ibrugtagning.....	14
6.1	Levering	14
6.2	Kontrol ved modtagelse.....	14
6.3	Første ibrugtagning	14
7.	Brug og betjening.....	15
7.1	Betingelser før brug.....	15
7.2	Betjening.....	15
7.2.1	Højdejustering	15
7.2.1.1	Elektrisk.....	15
7.2.1.2	Hydraulisk	15
7.2.2	Justering af polstringssektioner	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
7.2.2.1	Betjening med gasfjeder	16
7.2.2.2	Elektrisk justerbar	16
7.2.2.3	Ansigtsskærm.....	16
7.2.3	Flytning og placering.....	16
7.3	Tilbehør og ekstraudstyr.....	18
7.3.1	Muligt tilbehør og ekstraudstyr	18
7.3.2	Brug af tilbehør	19

7.3.2.1	Papirrulleholdere	19
7.3.2.2	Adapttere	19
7.3.2.3	Støtter	20
7.3.3	Brug af ekstraudstyr	22
7.3.3.1	Sidegitre	22
7.3.3.2	Forhøjelsessæt	23
7.3.3.3	Løftegalge	23
8.	Rengøring og hygiejne.....	24
8.1	Rengøring	24
8.2	Desinfektion.....	24
8.3	Begrænsninger	24
9.	Vedligeholdelse og inspektion.....	25
9.1	Daglig kontrol	25
9.2	Forebyggende vedligeholdelse	25
10.	Fejl og support.....	26
10.1	Generelt.....	26
10.2	Almindelige fejl.....	26
10.3	Support	26
11.	Bortskaffelse	27
11.1	Generelt.....	27
11.2	Genbrug og cirkularitet	27
12.	Garanti	27
12.1	Garantibetingelser.....	27
12.2	Undtagelser	27
12.3	Reparationer.....	27
12.4	Reservedele.....	28

1. GENERELLE OPLYSNINGER

1.1 Formålet med dette dokument

Denne vejledning indeholder oplysninger om sikker, korrekt og praktisk brug af udstyret og er beregnet til både fagpersonale og slutbrugere. Vi anbefaler, at hele vejledningen læses omhyggeligt, før produktet tages i brug.

Kontakt leverandøren ved spørgsmål eller uklarheder; leverandøren kan yde relevant rådgivning.

Vigtigheden af at læse og forstå denne vejledning er angivet på produktet med følgende symbol:



Følg brugsanvisningen

1.2 Producent

Wesseling BV
Venenweg 31
1161 AK Zwanenburg,
Nederlandene
Tlf. +31 20 497 5183
Websted: www.wesseling-bv.com
E-mail: info@wesseling-bv.com

1.3 Produktstatus og lovgivning

Dette produkt er medicinsk udstyr i klasse I i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745 (MDR). Produktet opfylder de generelle krav til sikkerhed og ydeevne i bilag I.

1.4 Brugerprofil

Produktet er udelukkende beregnet til professionel brug af kvalificeret personale.

1.5 Symboler

Symbolerne i denne brugsanvisning og på selve udstyret skal henlede brugerens opmærksomhed på vigtige sikkerhedsadvarsler og nyttige oplysninger. Overhold alle advarsler og begrænsninger, og vær opmærksom på alle angivne farer.

OBS!

“OBS!” angiver anbefalede handlinger vedrørende brug, vedligeholdelse og lejets tilstand, hvor der ikke er umiddelbar risiko for skade på udstyret eller personskade. Manglende overholdelse kan dog medføre skade på udstyret.




Advarsler

Advarsler gør brugere og patienter opmærksomme på risiko for personskade eller fare, hvis de angivne procedurer og betingelser ikke overholdes nøje under brug eller vedligeholdelse.



Fare

Dette advarselssymbol angiver vedligeholdelsesinstruktioner eller procedurer, som ved manglende overholdelse kan medføre risiko for elektrisk stød.

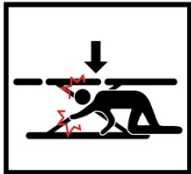 	 
Advarsel: Risiko for fastklemning eller personskade ved justering af behandlingslejet. Hold hænder, hoved og andre kropsdele væk fra bevægelige dele og fra området under liggefladen under betjening.	Advarsel: Risiko for fastklemning ved elektrisk eller hydraulisk justering af behandlingslejet. Hold hænder, fødder og ben væk fra saksemekanismen og understellet under betjening.

2. Anvendelse og brugskontekst

2.1 Tilsigtet anvendelse

Behandlingslejet er beregnet til at støtte og placere patienter eller klienter under medicinske, terapeutiske eller kosmetiske behandlinger.

Produktet muliggør en stabil og ergonomisk arbejdsstilling.

2.2 Brugere og patienter

Produktet må kun anvendes af fagpersonale. Patienter må ikke betjene produktet selv.

2.3 Anvendelsesområde

Egnet til brug i professionelle indendørsmiljøer såsom behandlingsrum og lægeklinikker.

2.4 Anvendelsesbegrænsninger

Brug er ikke tilladt:

- Uden for professionelle indendørsmiljøer
- Ud over de angivne belastningsgrænser
- Til andre formål end de beskrevne

2.5 Opbevaring og transport

- Temperatur: -10 °C til +50 °C
- Relativ luftfugtighed: 10 % til 90 %

2.6 Producenterklæringer

- Produktet er ikke et måleinstrument
- Produktet er ikke beregnet til klinisk afprøvning
- Produktet er ikke sterilt og er ikke beregnet til engangsbrug
- Korrekt funktion kræver vedligeholdelse i henhold til denne brugsanvisning

- Brugen er begrænset til de beskrevne anvendelser

3. Sikkerhed og advarsler

3.1 Generelle sikkerhedsprincipper

Kontrollér før hver brug, at produktet fungerer korrekt og sikkert.

3.2 Brugsrelaterede risici

Risikokode	Advarsel
R-01	Fastklemningsfare: Hold hænder, fødder og andre kropsdele væk fra bevægelige dele
R-02	Elektrisk fare: Må ikke bruges, hvis kablerne er beskadigede
R-03	Væltefare: Sørg for et stabilt underlag

OBS!

Følgende restrisici er fortsat til stede på trods af de trufne foranstaltninger:

- *Fastklemning ved bevægelige dele*
- *Elektrisk fare som følge af defekte komponenter*

3.3 Sikker brug

For at anvende behandlingslejet sikkert skal brugeren nøje overholde nedenstående anvisninger.

Manglende overholdelse kan medføre personskeade på patienten eller brugeren eller skade på produktet.

Behandlingslejet må ikke anvendes i følgende situationer:

- Hvis brugeren ikke har læst og fuldt ud forstået brugsanvisningen
- Hvis belastningen overstiger den angivne maksimale kapacitet
- Uden kontinuerlig visuel kontakt med patienten
- Hvis patienten og/eller lejet ikke er placeret stabilt
- Hvis lejet ikke hviler helt på benene, når det står stille, under behandling eller ved patientforflytning
- Hvis produktet er blevet tilpasset eller ændret i forhold til den oprindelige konfiguration
- Hvis betjeningsenheder eller komponenter er defekte eller delvist defekte
- Hvis indstillingerne er forkerte eller kan udgøre en risiko for patienten eller brugeren



Advarsler

Brug kun behandlingslejet, når det er korrekt indstillet og står stabilt, for at forebygge fald og personskeade.

Følgende sikkerhedsanvisninger skal også overholdes under brug:

- Hold kropsdele væk fra bevægelige komponenter og hængselspunkter
- Undgå fastklemning ved justering af komponenter
- Sørg for, at patienten forbliver korrekt placeret under enhver bevægelse



Advarsler

Forkert brug af justerbare sektioner kan medføre fastklemning eller pludselige bevægelser af patienten.

Følgende supplerende anvisninger gælder for produkter med elektriske komponenter:

- Tilslut kun lejet til en elektrisk installation, der opfylder de gældende sikkerhedsstandarder
- Undgå, at væsker kommer i kontakt med elektriske komponenter
- Afbryd altid strømforsyningen, før der udføres vedligeholdelse, eller lejet flyttes
- Undgå at beskadige kablerne (de må ikke trækkes, knækkes eller klemmes)
- Kontrollér regelmæssigt kablerne for slitage eller beskadigelse, og udskift dem om nødvendigt



Fare

Arbejd aldrig på elektriske komponenter, mens produktet er tilsluttet strømforsyningen.

3.4 Hændelser og indberetning

Alvorlige hændelser skal indberettes til producenten.

4. Produktets opbygning og konfiguration

4.1 Generel udførelse

Produktet fås i forskellige konfigurationer, som adskiller sig med hensyn til:

- Rammefarve
- Højdejustering og betjening
- Udførelser
- Bredde og udskæringer

Produktkoden på produktets mærkat identificerer alle egenskaber ved udstyrets konfiguration.

Brug koden nedenfor til hurtigt at identificere produktets konfiguration.

0	1	*	*	.	*	*	*	*	*	*	*	.	*	*	*
1	2	3	4	.	5	6	7	8	9	10	11	.	12	13	14

Position 1-2

Angiver modelnavnet: 01 = Praxis

Position 3-4

Angiver modeltypen

(Praxis) 1 Junior	01
(Praxis) 1	02
(Praxis) 2	03
(Praxis) 3	04
(Praxis) 3 Comfort	05
(Praxis) 4	06
(Praxis) 4 Comfort	07
(Praxis) 3 Podo	08
(Praxis) 4 Podo	09

		
01 + 02	03	04
		
05	06	07

	
08	09

Position 5

Angiver rammefarven:

Hvid, RAL 9010	1
Sort, RAL 9005	2

	
1	2

OBS!

Kun en hvid ramme er mulig til Praxis-serien.

Position 6

Angiver typen af højdejustering:

Elektrisk højdejustering	1
Hydraulisk højdejustering	2

	
1	2

Position 7+8

Angiver betjeningstypen:

Pumpebøjle	00
Fodkontakt	01
Fodkontakt i bakkeholder	02
Omkredskontakt	03
Håndbetjening	04
Dobbelt håndbetjening	05
Dobbelt fodkontakt i bakkeholder	06
Dobbelt fodkontakt	07

			
00	01	02	03
			
04	05	06	07

Position 9

Styreboks med Safety Anti-Collision-software (SAC-system).

Funktion:

Nej	0
Ja	1

	
0	1

Position 10

Styreboks med en maksimal løftekapacitet på 250 kg (MAXCAP250)

Funktion: Øger den maksimale løftekapacitet fra 200 kg til 250 kg.

Nej	0
Ja	1



0



1

Position 11

Anden aktuator til elektrisk justering af ryglænet.

OBS!

IKKE muligt til følgende modeller: Praxis 1 JR/Praxis 1/Praxis 3 Comfort/Praxis 4 Comfort

Nej	0
Ja	1



0



1

Position 12

Polstringsbredde

64 cm	1
70 cm	2
80 cm	3

Position 13

Ansigtssudskæring

Nej	0
Ja	1



0



1

Position 14

Udskæring i sædedelen.

OBS!*Gælder kun for Kombi (S).*

Nej	0
Ja	1

	
0	1

5. Tekniske specifikationer

5.1 Tekniske data

	Praxis 1 JR	Praxis 1	Praxis 2	Praxis 3	Praxis 4
Sikker arbejdsbelastning	400 kg				
Maksimal patientvægt	200 250 kg				
Elektrisk højdejustering	42 til 112 cm med en hastighed på 7,5 mm/s - 8.000 N, 470 W, 2,0 Ah, slaglængde 300 mm				
Hydraulisk højdejustering	48 til 98 cm, hydraulisk pumpe, 10.000 N, slaglængde 200 mm				
Justerbare sektioner	-	-	1	2	3
Justerbar hoved-/rygsektion	-	-	0° til +85°	0° til +85°	0° til +85°
Justerbar fodsektion	-	-		-85° til +35°	-85° til +35°
Hjul	Ø75 mm				
Bremsesystem	Central betjening bag på lejet				
Vægt	±100 kg	±100 kg	±100 kg	±100 kg	±100 kg
Længde	198 cm	198 cm	198 cm	198 cm	202 cm
Bredde	64 cm 70 cm 80 cm				
Polstringstykkelse	± 60 mm ± 70 mm				
Fyld	Polyether SG 90/30				
Kunstlæder	Fresh, Purfect, Tovega				

	Praxis 3 Comfort	Praxis 4 Comfort	Praxis 3 Podo	Praxis 4 Podo
Sikker arbejdsbelastning	400 kg			
Maksimal patientvægt	200 250 kg			
Elektrisk højdejustering	60 til 130 cm med en hastighed på 7,5 mm/s - 8.000 N, 470 W, 2,0 Ah, slaglængde 300 mm		42 til 112 cm med en hastighed på 7,5 mm/s - 8.000 N, 470 W, 2,0 Ah, slaglængde 300 mm	
Hydraulisk højdejustering	66 til 116 cm, hydraulisk pumpe, 10.000 N, slaglængde 200 mm		48 til 98 cm, hydraulisk pumpe, 10.000 N, slaglængde 200 mm	
Justerbare sektioner	2	3	3	4
Justerbar hoved-/rygsektion	0° til +85°			
Justerbar fodsektion	-90° til +35°		-85° til +35°	
Hjul	Ø75 mm			
Bremsesystem	Central betjening bag på lejet			
Vægt	±100 kg	±100 kg	±100 kg	±100 kg
Længde	198 cm	202 cm	198 cm	202 cm
Bredde	64 cm 70 cm 80 cm			
Polstringstykkelse	± 60 mm ± 70 mm			
Fyld	Polyether SG 90/30			
Kunstlæder	Fresh, Purfect, Tovega			

6. Installation og ibrugtagning

6.1 Levering

Produktet leveres fuldt monteret og er straks klar til brug. Under transport er polstringen beskyttet af en papemballage, som nemt kan fjernes.

Eksportforsendelser pakkes desuden i en passende kasse for at beskytte produktet under transport.

OBS!

Sørg ved fjernelse af emballagen for, at sakse og/eller knive ikke kommer i direkte kontakt med produktet. De kan beskadige polstringen!

6.2 Kontrol ved modtagelse

Eventuelle transportskader skal straks anmeldes til transportøren og leverandøren. Af sikkerhedsmæssige årsager må udstyret ikke anvendes.

6.3 Første ibrugtagning

Kontrollér alle funktioner før første ibrugtagning.

Hydrauliske varianter kan tages i brug umiddelbart efter kontrollen. På elektriske varianter skal netledningen og betjeningen, som er fastgjort med en kabelbinder, først frigøres. Derefter kan netledningen sættes i stikkontakten.



Advarsler



Fare

Se kapitel 7, "Brug og betjening"

7. Brug og betjening

7.1 Betingelser før brug

Udfør følgende kontroller før hver brug:

1. Kontrollér lejet for synlige skader på f.eks. polstring, ramme og kabler
2. Kontrollér, at lejet står stabilt. På et ujævnt gulv kan nivelleringsfødderne under lejets ben justeres. Se illustration.
3. Kontrollér, at strømkablet er intakt og korrekt tilsluttet



Drej på benproppen for at justere den til den ønskede højde.



Advarsler

Brug ikke lejet, hvis der konstateres fejl eller uregelmæssigheder

7.2 Betjening

7.2.1 Højdejustering

7.2.1.1 Elektrisk

Betjen lejet med fod-, hånd- eller omkredsbetjeningen.



Fodbetjening




Håndbetjening



Omkredsbetjening

7.2.1.2 Hydraulisk

Betjen lejet ved hjælp af pumpebøjlen.

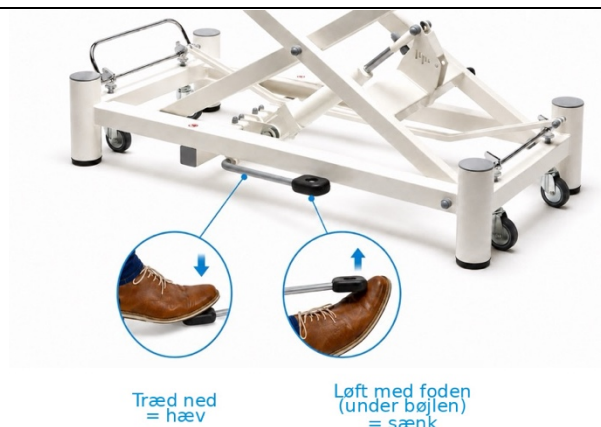

Hydraulisk



Advarsler

Hold hænder, fødder og kabler væk fra bevægelige dele. (Se R-01)

7.2.2 Justering af polstringssektioner

7.2.2.1 Betjening med gasfjeder

Brug gasfjederhåndtagene, og understøt sektionen under justeringen.



7.2.2.2 Elektrisk justerbar

Brug en hånd- eller fodkontakt til elektrisk justering af rygsektionen.

			
Pilene på betjeningen angiver bevægelsesretningen.		+ er op, - er ned	

7.2.2.3 Ansigtsudskæring

Næsten alle lejer kan leveres med en ansigtsudskæring. Når denne mulighed vælges, medfølger der som standard et fyldstykke i samme farve som lejet.

OBS!

Ikke muligt til Praxis 1 JR/Praxis 1



7.2.3 Flytning og placering

Praxis-lejerne har fire dobbelthjul, så de kan manøvreres på trange steder. Bøjlen til hjulløftesystemet sidder bag på lejet. Når bøjlen trykkes ned, bliver lejet mobilt. Løft bøjlen, når den ønskede placering er nået, så hjulene trækkes ind igen. Brug aldrig lejet, hvis hjulene ikke er trukket helt ind! De fire ben har nivelleringsfødder, som kan justeres individuelt, hvis gulvet er ujævnt.

OBS!

Se 7.1 Betingelser før brug for justering af fødderne.

FLYTNING AF LEJET	SÆNKNING AF LEJET NED PÅ BENENE	FREMGANGSMÅDE
		- For at flytte lejet skal bøjlen trykkes ned med foden, indtil den stopper. - For at sænke lejet ned på benene skal bøjlen skubbes op med foden, indtil alle ben står på gulvet.



Advarsler

Lejet skal stå på benene under patientforflytning eller behandling.

7.3 Tilbehør og ekstraudstyr

7.3.1 Muligt tilbehør og ekstraudstyr

Varenummer	Praxis 1 JR	Praxis 1	Praxis 2	Praxis 3	Praxis 4	Praxis 3 Comfort	Praxis 4 Comfort	Praxis 3 Podo	Praxis 4 Podo
VERHOG00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HEKKEN00	X	X	X	-	-	-	-	-	-
HEKKEN01	-	X	-	-	-	-	-	-	-
PAPE003	-	-	X	-	-	-	-	-	-
PAPRAX	-	-	X	X	X	X	X	X	X
ADAPB01	-	-	X	-	-	-	-	-	-
ADAPB02	-	-	-	X	X	-	-	X	x
ADAPB03 fra 80 cm bredde	-	-	-	X	X	-	-	X	X
VOET001	-	-	X	X	X	X	X	X	X
HAKST00	-	-	X	X	X	X	X	X	X
BEENS01	-	-	X	X	X	X	X	X	X
BEENS02	-	-	X	X	X	X	X	X	X
ARMST00	-	-	X	X	X	X	X	X	X
ARMSTSAAR3D	-	-	X	X	X	X	X	X	X
ARMST3	-	-	-	X	X	-	-	X	X

OBS!

Støtter kan kun monteres i kombination med adaptore!

7.3.2 Brug af tilbehør

7.3.2.1 Papirrulleholdere

Varenummer: PAPRAX



På Praxis-lejer monteres papirrulleholderen altid på hoved-/rygsektionen.

Montering af en papirrulle:

1. Fjern stangen af rustfrit stål fra holderen.
2. Skub stangen gennem rullen.
3. Sæt den tilbage i holderen.

OBS!

Den maksimale rullebredde, der passer i holderen, er 60 cm.

7.3.2.2 Adaptere

Adapterne leveres som et sæt og monteres på lejet før levering. Adapterne kan justeres, så de forskellige støtter kan placeres korrekt.

Juster højden på den relevante støtte på følgende måde:

1. Løsn det sorte spændegreb, og flyt støtten til den ønskede højde.
2. Spænd derefter spændegrebet godt fast, så støtten bliver i den valgte højde.



Advarsler

Når patientens vægt hviler på støtten, må spændegrebet først løsnes, når det er sikret, at hele vægten er understøttet!

Varenummer: ADAPB02 + ADAPB03 + ADAPB05 + ADAPB06

Disse adaptere kan låses i enhver position ved hjælp af trækknappen.



Varenummer: ADAPB01 + ADAPB04



7.3.2.3 Støtter

Fodstøtter

Fodstøtterne leveres som et sæt og separat sammen med lejet. De kan placeres indad eller udad. Sammen med drejeadapterne kan støtterne altid placeres korrekt.

Varenummer: VOET001



Hælstøtter

Hælstøtterne leveres som et sæt og separat sammen med lejet. Sammen med drejeadapterne kan de altid placeres korrekt.

Varenummer: HAKST00



Benstøtter

Ben-/knæstøtterne leveres som et sæt og separat sammen med lejet. Den vinklede stolpe gør det sammen med adapterne muligt at justere støtterne i bredde, dybde og højde, så de kan placeres korrekt.

Varenummer: BEENS01



Armstøtte

Armstøtterne leveres enkeltvis og separat sammen med lejet. Den vinklede stolpe gør det sammen med adapterne muligt at justere armstøtterne i bredde, dybde og højde, så de kan placeres korrekt.

Varenummer: ARMST00



3D-armstøtte

Denne PU-armstøtte leveres enkeltvis og kan justeres til enhver vinkel. Drej kuglegrebet på undersiden for at indstille den ønskede vinkel. Den vinklede stolpe gør det sammen med adapterne muligt at justere støtten i bredde, dybde og højde, så den kan placeres korrekt. Armpuden måler 350 x 115 mm og er ergonomisk udformet.

Varenummer: ARMSTSAAR3D



Advarsler

Når patientens vægt hviler på støtten, må spændegrebet først løsnes, når det er sikret, at hele vægten er understøttet!

Sammenklappelig armstøtte

Disse armstøtter er fast monteret på lejet og kan klappes bagud. De leveres som standard i samme farve som lejet.

Varenummer: ARMST3



OBS!

KUN tilgængelig til følgende modeller: Praxis 3/Praxis 4/Praxis 3 Podo/Praxis 4 Podo



Advarsler

Brug ikke støtterne som afsæt, når patienten rejser sig. Støtten kan vippe bagud.

7.3.3 Brug af ekstraudstyr

7.3.3.1 Sidegitre

De valgfrie sidegitre giver ekstra støtte og større tryghed for patienten ved op- og nedstigning samt under behandlingen. Sidegitrene kan nemt klappes op og ned, og det skal før hver brug kontrolleres, at de er låst korrekt.



Advarsler

Efterlad aldrig en patient uden opsyn, heller ikke når sidegitrene er slået op. Sidegitrene giver ekstra støtte, men garanterer ikke beskyttelse mod fald eller andre usikre situationer. Hold altid patienten under opsyn.

Varenummer:

HEKKEN00: 100 cm langt

HEKKEN02: 140 cm langt (ikke tilgængelig til Praxis)



7.3.3.2 Forhøjelsessæt

Det valgfrie forhøjelsessæt hæver behandlingslejets understel med 6 cm. Det øger den samlede frihøjde til 17 cm, så hjælpemidler som patientlifte lettere kan placeres og flyttes under behandlingslejet.

OBS!

Ved kombination med en hydraulisk pumpe placeres pumpens betjeningsarm også højere.




Advarsler

Kontrollér altid før brug, at behandlingslejet står stabilt.

Varenummer: VERHOG00

Dette hæver rammen med 6 cm.

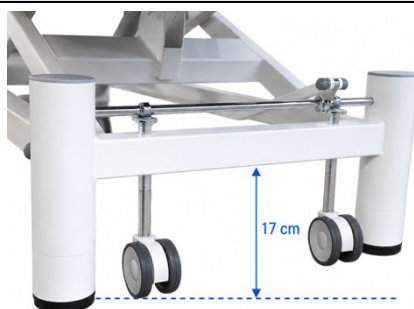

7.3.3.3 Løftegalge

Løftegalgen er fastgjort til den øverste ramme, så afstanden mellem løftegalgen og patienten forbliver konstant ved højdejustering. Den leveres som standard med et højdejusterbart trekantet håndgreb.

OBS!

- Kun tilgængelig til Praxis 2.
- Lejets samlede længde øges med 7,5 cm.

Varenummer: PAPE003



8. Rengøring og hygiejne

Korrekt rengøring og desinfektion er afgørende for at bevare polstringen og opretholde et hygiejnisk arbejdsmiljø. Følg nedenstående anvisninger nøje.

8.1 Rengøring

Rengør lejet regelmæssigt for at forlænge polstringens levetid.

PVC-kunstlæder (Skai FRESH)

Rengør med en blød klud eller børste, vand og et neutralt rengøringsmiddel. Fjern pletter straks. Skyl altid med rent vand, og tør overfladen grundigt.

PU-kunstlæder (Skai PERFECT)

Rengør med en blød klud eller børste og et rengøringsmiddel fortyndet med 70 % vand. Skyl altid med rent vand, og tør overfladen grundigt.

OBS!

En liste over testede og godkendte rengørings- og desinfektionsmidler til hver polstringstype fås på anmodning. Farvekort med de tilhørende specifikationer fås også på anmodning.

8.2 Desinfektion

Sørg for, at lejet er helt rent efter hver brug. Desinficér kunstlæderet, og brug om nødvendigt en ny papirrulle eller et nyt beskyttelsesovertræk til hver ny patient.



Advarsler

Brug kun egnede desinfektionsmidler, der er kompatible med kunstlæderet. Overdreven eller forkert brug kan forkorte polstringens levetid.

8.3 Begrænsninger

- Brug ikke aggressive rengøringsmidler såsom opløsningsmidler, klor eller slibende produkter
- Brug ikke damprensere eller højtryksrensere.
- Undgå længerevarende påvirkning fra stærke kemikalier.
- Fjern pletter så hurtigt som muligt for at undgå permanente skader.



Advarsler

Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan beskadige polstringen og medføre, at garantien bortfalder!

9. Vedligeholdelse og inspektion

9.1 Daglig kontrol

Før hver brug skal brugeren kontrollere, at produktet fungerer sikkert og korrekt.

OBS!

Kontrollér, at funktionerne virker som beskrevet i 7.1 Betingelser før brug.



Advarsler

Brug ikke produktet, hvis:

- Komponenter er løse eller beskadigede.
- Lejet ikke står stabilt.
- Sikker behandling ikke kan garanteres

9.2 Forebyggende vedligeholdelse

Periodisk vedligeholdelse er nødvendig for sikker og langvarig drift.

Anbefalet hyppighed:

- Mindst én gang om året, afhængigt af brugsintensiteten

Forebyggende vedligeholdelse kan udføres af:

- Brugeren, til visuel kontrol og funktionskontrol.
- Producenten eller en part, som producenten har autoriseret, til omfattende inspektion og vedligeholdelse.

Komponenter, der skal kontrolleres:

- Rammekonstruktionen for revner eller deformation
- Fastgørelseselementer såsom bolte og skruer
- Gasfjedrenes og justeringsmekanismernes funktion
- Hjulløftesystem og hjulenes bevægelighed
- Elektriske komponenter og ledningsføring (hvis relevant)

OBS!

Vær under brug opmærksom på:

- Usædvanlige lyde
- Rykvisse bevægelser
- Nedsat stabilitet

Dette kan være tegn på slitage eller fejl.

- Mangelfuld vedligeholdelse kan reducere produktets sikkerhed og funktion.
- Hvis der er tvivl om produktets tekniske tilstand, skal vedligeholdelsen udføres af producenten eller en autoriseret part.



Advarsler

- Udfør ikke vedligeholdelse, mens en patient ligger på lejet.
- Sørg for, at produktet står stabilt og ikke kan bevæge sig under vedligeholdelsesarbejdet.



Fare

Afbryd strømforsyningen, før der arbejdes på elektriske komponenter (hvis relevant)

10. Fejl og support

10.1 Generelt

Ved en fejl eller unormal funktion:

- Stop brugen af produktet
- Kontrollér, om årsagen er synlig (f.eks. kabel, betjening eller blokering)
- Brug ikke produktet, hvis sikkerheden ikke kan garanteres.



Advarsler

Stop brugen af produktet, hvis der konstateres en fejl, som kan påvirke patientens eller brugerens sikkerhed.

10.2 Almindelige fejl

Problem: Højdejusteringen virker ikke

Mulige årsager:

- Betjeningen er defekt/ikke tilsluttet korrekt
- Netledningen er defekt/ikke tilsluttet korrekt
- Aktuatorens er defekt/ikke tilsluttet korrekt
- Styreboksen er defekt/ikke tilsluttet korrekt
- De hydrauliske pumpebøjler er gået løs fra pumpen

Problem: En justerbar sektion kan ikke placeres eller bliver ikke i den indstillede position.

Mulige årsager:

- Defekt eller forkert indstillet gasfjeder
- Kablet er beskadiget eller knækket



Advarsler

Brug ikke produktet, hvis justerbare sektioner bevæger sig uventet eller ikke bliver i position, for at forebygge fastklemning eller personskade.

OBS!

Kontrollér simple årsager som strømforsyning og betjening, før producenten kontaktes.

10.3 Support

Kontakt producenten for teknisk support. Se 1.2 Producent.

OBS!

Hav produktets serienummer klar, når supporten kontaktes.



11. Bortskaffelse

11.1 Generelt

Ved udløbet af produktets levetid skal det bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokale regler.

OBS!

- *Metalkomponenter kan genanvendes*
- *Polstring og plastkomponenter skal behandles separat*
- *Elektriske komponenter (hvis til stede) skal bortskaffes som elektronikaffald*



Advarsler

Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald!

11.2 Genbrug og cirkularitet

For at forlænge produktets levetid og understøtte cirkulær anvendelse kan produktet tilbydes til genbrug eller renovering.

Kontakt følgende for at få vurderet produktets egnethed til renovering eller genbrug:

Fysio-Tech B.V. (en del af Wesseling B.V.)

12. Garanti

12.1 Garantibetingelser

Producenten yder 36 måneders garanti fra leveringsdatoen.

Garantien dækker:

- Fabrikationsfejl
- Materialefejl ved normal brug

12.2 Undtagelser

Garantien gælder ikke for:

- Normal slitage på komponenter
- Skader forårsaget af forkert brug eller overbelastning
- Skader forårsaget af eksterne faktorer (f.eks. fugt eller stød)
- Ændringer eller reparationer uden producentens godkendelse

OBS!

Brug uden for de anvendelser, der er beskrevet i denne vejledning, kan medføre, at garantien bortfalder

12.3 Reparationer

Reparationer inden for garantiperioden:

- Udføres af producenten eller en autoriseret part.

Reparationer uden for garantiperioden:

- Udføres mod betaling.

OBS!

Uautoriserede reparationer kan medføre usikre situationer og få garantien til at bortfalde.

12.4 Reservedele

Brug kun originale reservedele, som leveres af producenten

OBS!

Brug af uoriginale dele kan reducere produktets sikkerhed og ydeevne.